

MOBIS

02-8015C


TUALETO KĖDĖ SU RATUKAIS TUALETES KRĖSLS UZ RITENIEM RATASTEGA POTITOOL



- LT** Naudojimo instrukcija
- LV** Lietošanas instrukcija
- EE** Kasutusjuhend



- LT** Šią naudojimo instrukciją PRIVALOMA pateikti gaminio naudotojui. PRIEŠ NAUDOJANT šį gaminį PRIVALOMA perskaityti naudojimo instrukciją ir išsaugoti ją, kad galėtumėte pasinaudoti ja ateityje.
- LV** Šī lietošanas instrukcija ir OBLIGĀTI jāizsniedz produkta lietotājam. PIRMS preces izmantošanas šī lietošanas instrukcija ir OBLIGĀTI jāizlasa un jā saglabā turpmākai uzziņai.
- EE** See kasutusjuhend TULEB anda toote kasutajale. ENNE selle toote kasutamist TULEB see kasutusjuhend läbi lugeda ja edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

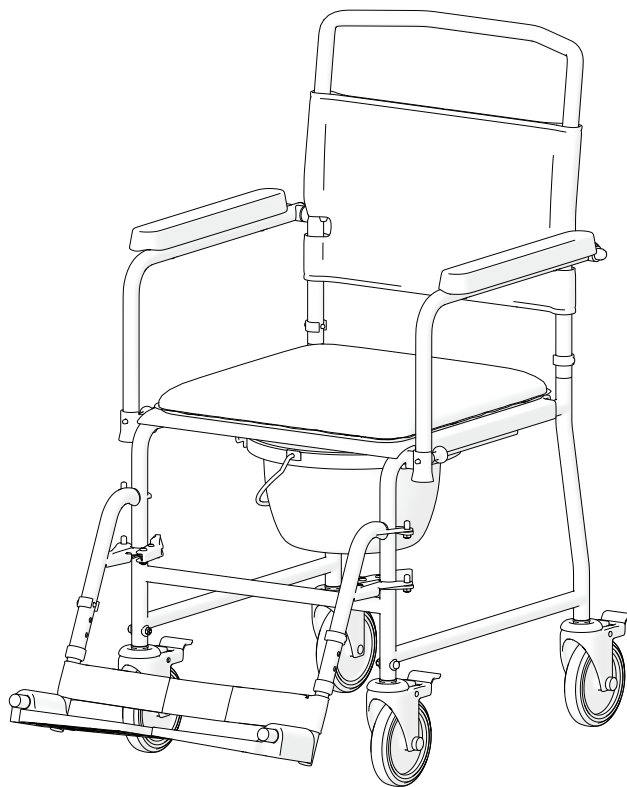


LT


LV

EE

1 pav. / 1. attēls / Joonis 1

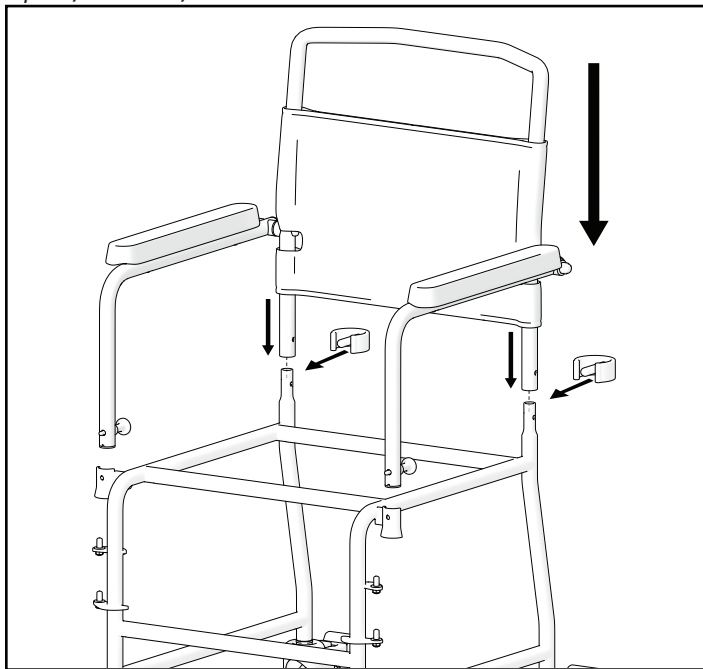


2 pav. / 2. attēls / Joonis 2

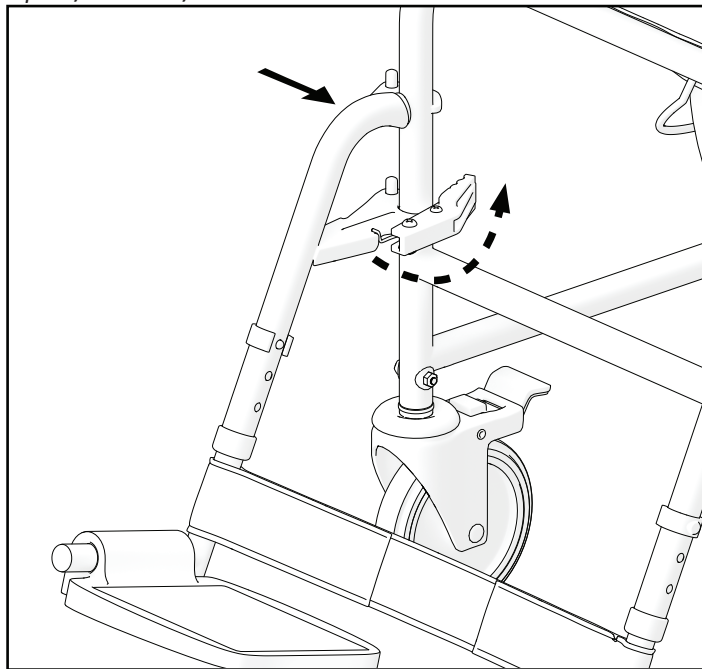





3 pav. / 3. attēls / Joonis 3

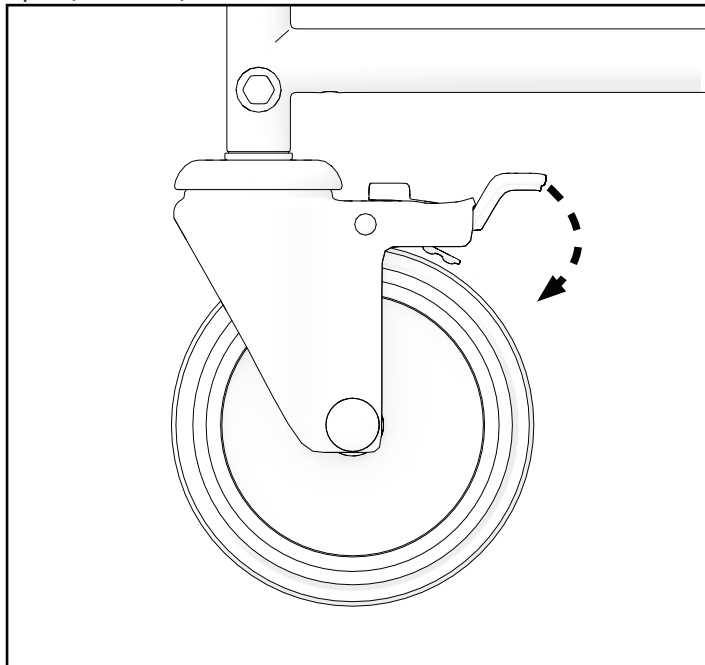


4 pav. / 4. attēls / Joonis 4

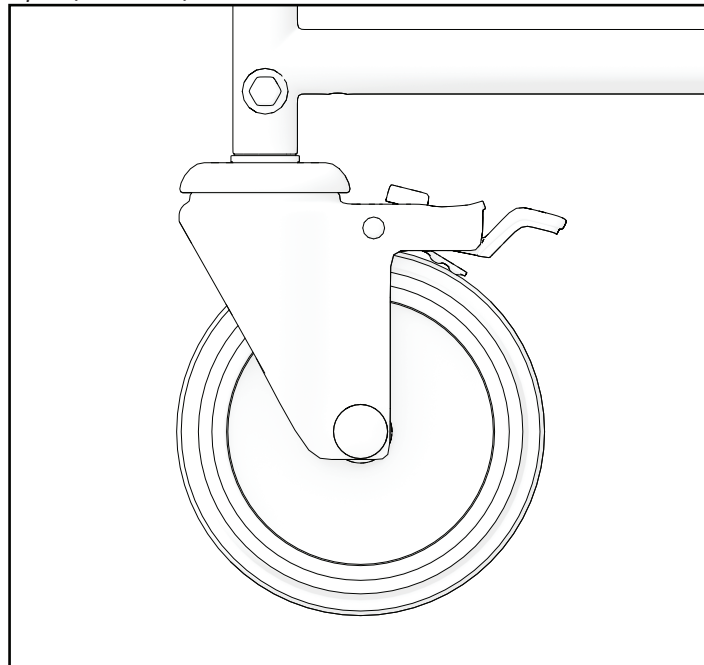


5 pav. / 5. attēls / Joonis 5

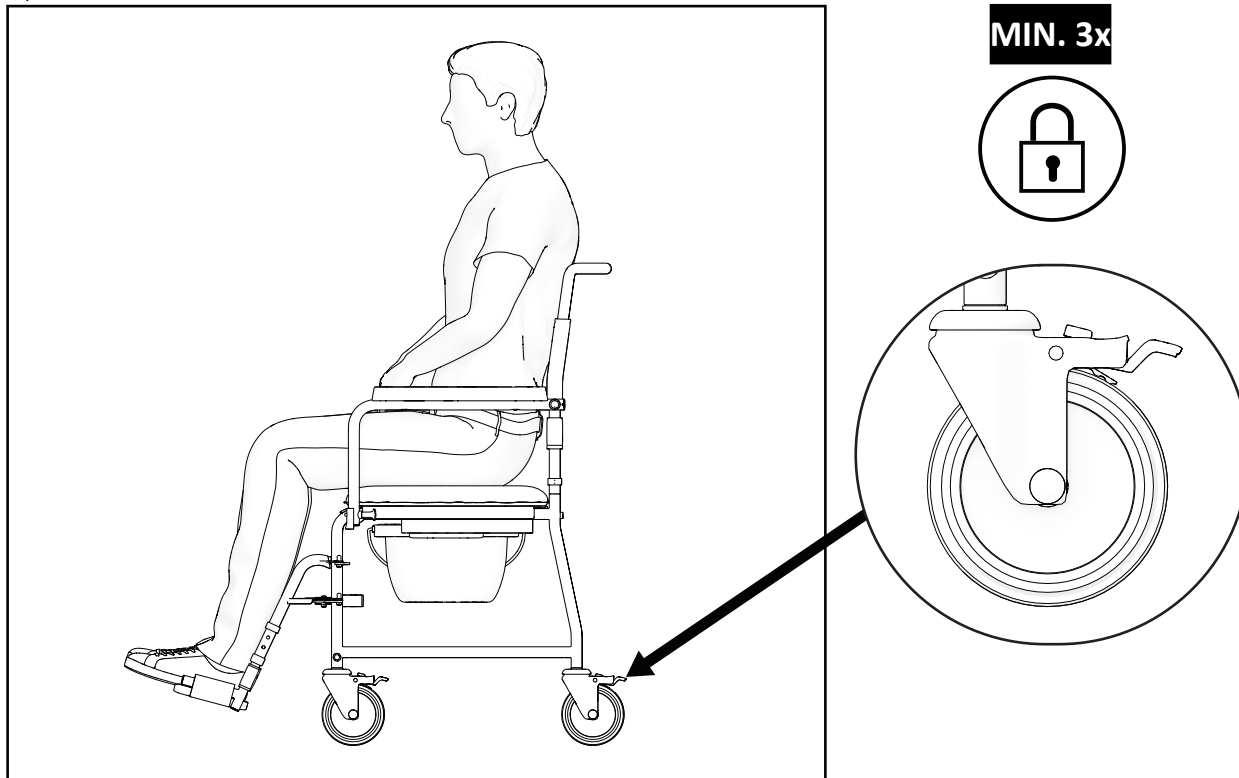


6 pav. / 6. attēls / Joonis 6

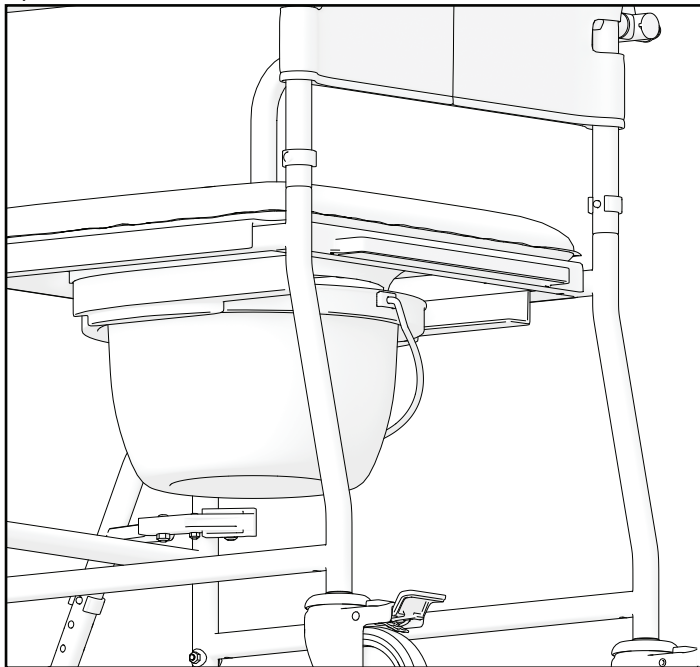

7 pav. / 7. attēls / Joonis 7

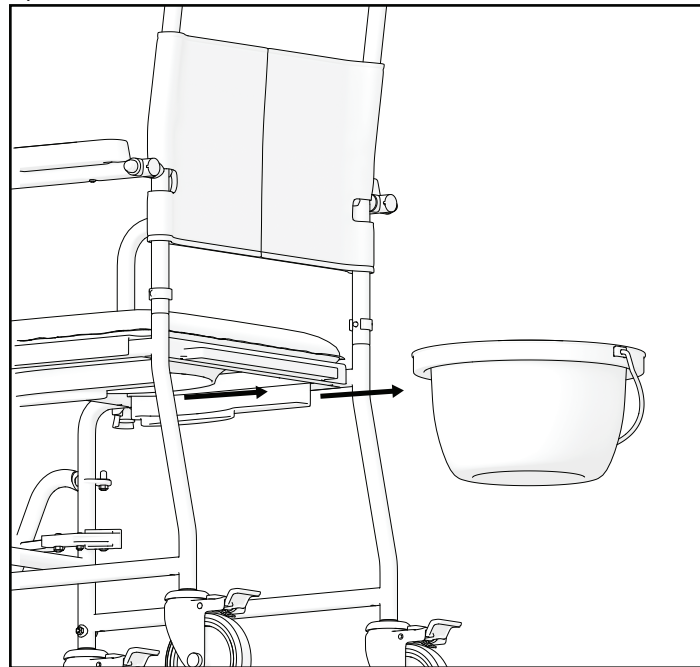

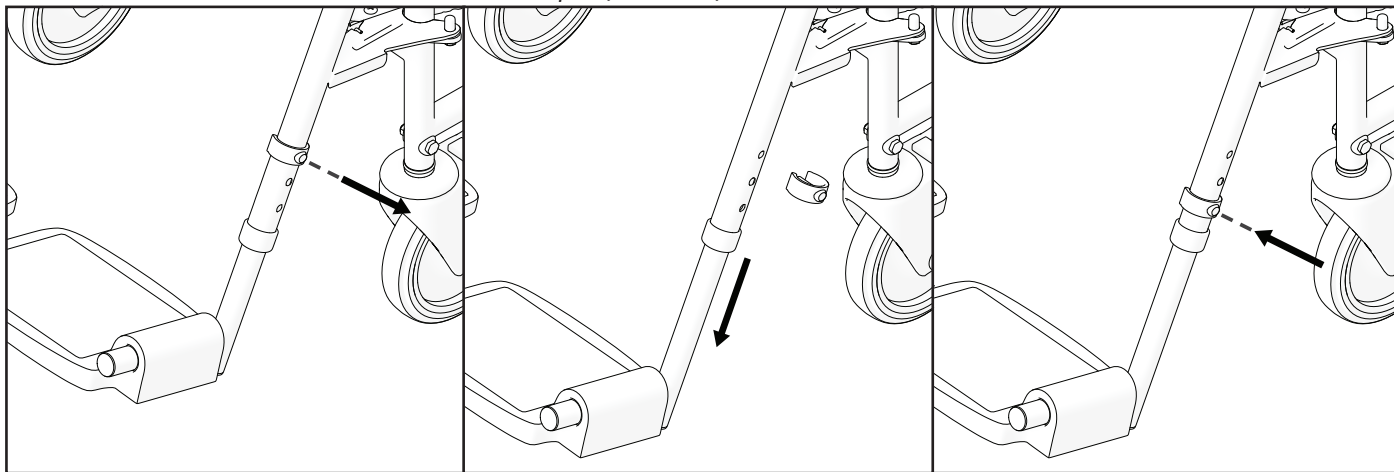8 pav. / 8. attēls / Joonis 8

LT**SIMBOLIAI**

Šioje instrukcijoje įspėjimai žymimi specialiais simboliais. Kartu su simboliais pateikiama antraštė, kur nurodomas pavojaus rimtumas arba svarbiausia informacija.

i Pateikiama pagrindinė informacija, rekomendacijos ir informacija apie efektyvų ir sklandų naudojimą.



ĮSPĖJIMAS / ATSARGIAI – naudojant įrenginį būkite atsargūs. Tam tikroje situacijoje naudotojas turi būti budrus arba imtis veiksmų, kad išvengtų nepageidaujamų pasekmių.



DĖMESIO! Šis ženklas naudojamas itin svarbioms jūsų saugumo užtikrinimo temoms žymėti. Perskaitykite naudojimo instrukciją.

SAUGOS INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS
Nelaimingų atsitikimų rizika. Siekiant užtikrinti tinkamą ir saugų tualetų kėdės naudojimą, rekomenduojame laikytis saugos instrukcijų. Ši kėdė buvo suprojektuota taip, kad būtų stabiliai sumontuota ir užtikrintų stabilumą sėdint. Bet koks judesys sėdint ant tualetų kėdės turi įtakos svorio centrui, todėl kėdė gali apvirsti.



ATSARGIAI
Tualetų kėdė skirta naudoti tik vienam asmeniui vienu metu.



ĮSPĖJIMAS
Visi aptarnavimo, valymo ir reguliavimo darbai turi būti atliekami, kai tualetų kėdė su ratukais nėra nenaudojama.



ĮSPĖJIMAS
Draudžiama viršyti didžiausią saugią tualetų kėdės apkrovą.

BENDROSIOS NUOSTATOS

ĮVADAS

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama svarbi informacija apie gaminio naudojimą. Siekiant užtikrinti saugų gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite instrukciją ir laikykitės joje pateiktų saugos rekomendacijų. Tualetu kėdė su ratukais - tai praktiškas, saugus ir patogus sprendimas asmenims, turintiems judėjimo sunkumų arba tais atvejais, kai nėra galimybės naudotis įprastu tualetu. Pagamintos tualetu kėdės gamykloje kruopščiai patikrinamos, siekiant užtikrinti, kad naudotoją pasiektų tik patikimas ir aukštos kokybės gaminys. Norint prailginti gaminio tarnavimo laiką, rekomenduojama kėdę laikyti sausoje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir reguliariai valyti. Vadovaujantis MDR 2017/745, ši naudojimo instrukcija parengta keliomis kalbomis. Užtikrinkite, kad atitinkamoje valstybėje narėje naudotojui būtų pateikta atitinkama kalba parengta versija.

i Atkreipkite dėmesį, kad šiame dokumente gali būti skyrių, kurie nėra susiję su jūsų gaminiu, nes šis dokumentas taikomas visiems esamiems modeliams. Jei nenurodyta kitaip, kiekvienas šio dokumento skyrius taikomas visiems gaminio modeliams.

PRATARMĖ

Dėkojame už parodytą pasitikėjimą Kid-Man® gaminiais. Kiekvienas gaminys yra patikrintas gamykloje ir pateikiamas nepriekaištingos būklės. Linkime sėkmingo naudojimo ir tikimės, kad UAB Kasko Group | Kid-Man® gaminys palengvins jūsų kasdienį gyvenimą.

GARANTIJĄ

Suteikiama 24 mėnesių garantija nuo įsigijimo datos. Bet kokie neleistini pakeitimai, atlikti be gamintojo patvirtinimo, panaikina gamintojo atsakomybę. Tai gali būti maksimalios naudotojo apkrovos viršijimas ir netinkamas gaminio naudojimas. Garantija galioja tik pateikus pilnai užpildytą garantinį kvitą. UAB Kasko Group | Kid-Man® (toliau – gamintojas), gavusi iš pirkėjo pretenziją, per 4 savaites nusprendžia, ar gedimui taikoma garantija. Jei netaikoma ir klientas sutinka, gamintojas, jei įmanoma, pašalina problemą. Visas išlaidas, įskaitant transportavimo, padengia klientas. Garantinis remontas nepratęsia garantijos laikotarpio.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl:

- naudojimo instrukcijos nesilaikymo;
- netinkamo naudojimo;
- natūralaus nusidėvėjimo;
- netinkamo pirkėjo atliktų surinkimo, nustatymo arba trečiosios šalies atliktų techninių pakeitimų;
- nepatvirtintų trečiosios šalies priedų naudojimo vietoj patvirtintų gamintojo priedų;
- neleistinos modifikacijos ir (arba) netinkamos atsarginės dalies naudojimo.

STANDARTAI IR TAISYKLĖS

Tualetų kėdė su ratukais atitinka šiuos reikalavimus:

a) 2017 m. balandžio 5 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/745 dėl medicinos prietaisų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 bei panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB;

TINKAMUMO NAUDOTI LAIKAS

Numatoma gaminio naudojimo trukmė – 5 (penkeri) metai, jei kėdė naudojama kasdien ir laikantis saugos, techninės priežiūros instrukcijų ir pagal naudojimo paskirtį, nurodytą šioje naudojimo instrukcijoje.

Pasibaigus naudojimo laikui, gaminys turi būti perdirbtas. Nemeskite gaminio kartu su buitinėmis atliekomis (žr. skyrių „UTILIZAVIMAS“).

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ

Gamintojas: UAB „Kasko Group“ (registruotasis prekės ženklas Kid-Man®)

Adresas: A. Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lietuva

Telefonas Nr.: +370 5 265 0000

El. paštas: info@kid-man.com

Interneto svetainė: www.kid-man.com

INFORMACIJA APIE GAMINĮ

Gaminys: TUALETO KĖDĖ SU RATUKAIS

Modelis: MOBIS

REF: 02-8015C

NUMATYTOJI PASKIRTIS IR INDIKACIJOS

Tualetų kėdė su ratukais MOBIS skirta asmenims, turintiems nuolatinių arba laikinų judėjimo sutrikimų ir neturintiems galimybės naudotis įprastu tualetu.

KONTRAINDIKACIJOS

Naudojant pagal paskirtį kontraindikacijų nenustatyta.

NUMATYTIEJI NAUDOTOJAI

Tualetų kėdė su ratukais skirta asmenims su negalia, neturintiems galimybės naudotis įprastu tualetu. Didžiausia leistina apkrova – 130 kg.



ĮSPĖJIMAS


Nelaimingų atsitikimų rizika.

Draudžiama viršyti didžiausią saugią tualetų kėdės su ratukais apkrovą.

GAMINIO ETIKETĖ

Identifikavimo etiketė pritvirtinta prie gaminio rėmo (žr. paveikslą).

1. Gaminys
2. Modelis
3. Didžiausia apkrova
4. Gamintojas / kontaktiniai duomenys
5. Pagaminimo data
6. Unikalusis priemonės identifikatorius (UDI) / serijos numeris (SN)
7. CE ženklas
8. Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis

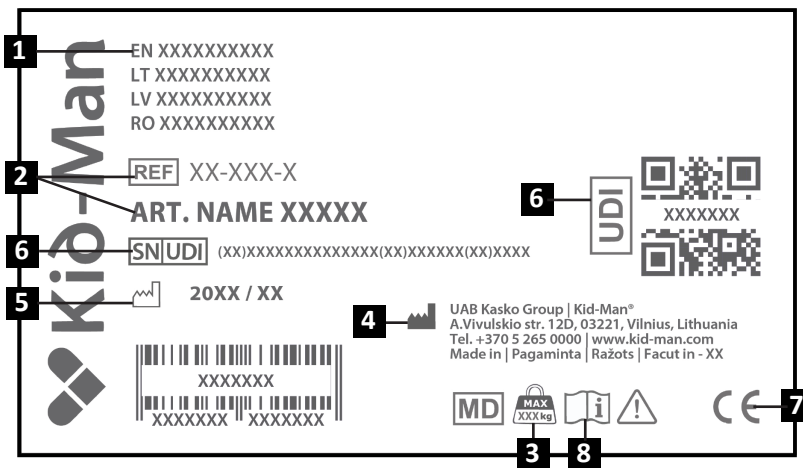


PAKUOTĖS TURINYS

Tualetų kėdė su ratukais MOBIS pristatoma kartoninėje pakuotėje ir yra paruošta naudojimui. Rekomenduojame pakuotę pasilikti – ji gali praversti gaminiui laikyti ar grąžinti.
Gavę siuntą, patikrinkite, ar pakuotė nepažeista transportavimo metu.

- i** Jeigu pastebėjote pažeidimų, nedelsdami apie tai praneškite transporto įmonei.
- i** Patikrinkite pakuotės turinį, ir jeigu trūksta kurio nors žemiau išvardyto elemento, kreipkitės į vietinį platintoją.

Pakuotės turinys:

- 1 x Porankis, atlošas ir stūmimo rankena
- 1 x Rėmas su priekiniais ir galiniais ratukais
- 1 x Sėdynės užvalkalas
- 1 x Sėdynė su išpjova
- 1 x Puodas su dangčiu
- 2 x C formos spaustukai
- 1 x Pakojų diržas
- 2 x Pakojai
- Naudojimo instrukcija

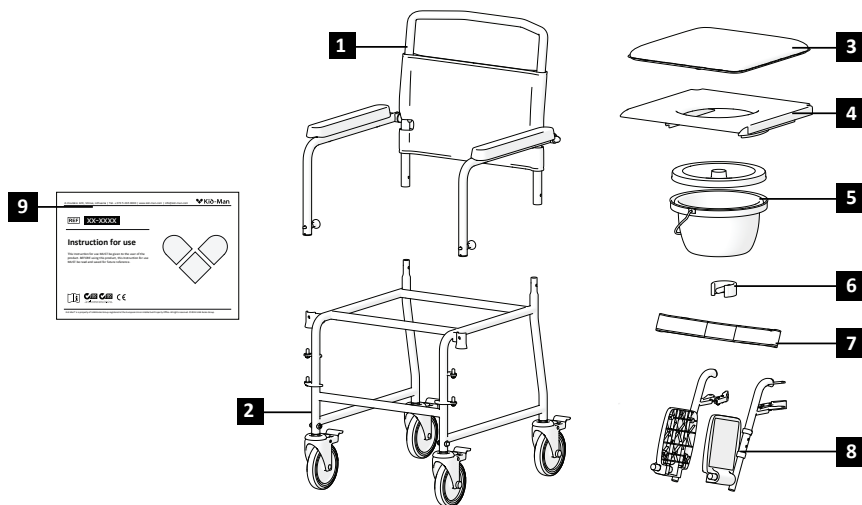


KOMPONENTAI IR FUNKCIJOS

Apžvalga:

1. Nugaros atrama
2. Porankis
3. Porankio fiksatorius
4. Sėdynė
5. Puodas tualetui kėdei su dangčiu
6. Pakojimo atlenkimo svirtis
7. Pakojis
8. Pakojimo diržas
9. Pakojimo plokštelė
10. Rėmas
11. Galiniai ratukai su stabdžiais
12. Priekiniai ratukai su stabdžiais

i Dėl nuolatinio gaminio tobulinimo jūsų tualetinio kėdės dizainas gali šiek tiek skirtis nuo aprašyto šiame vadove.

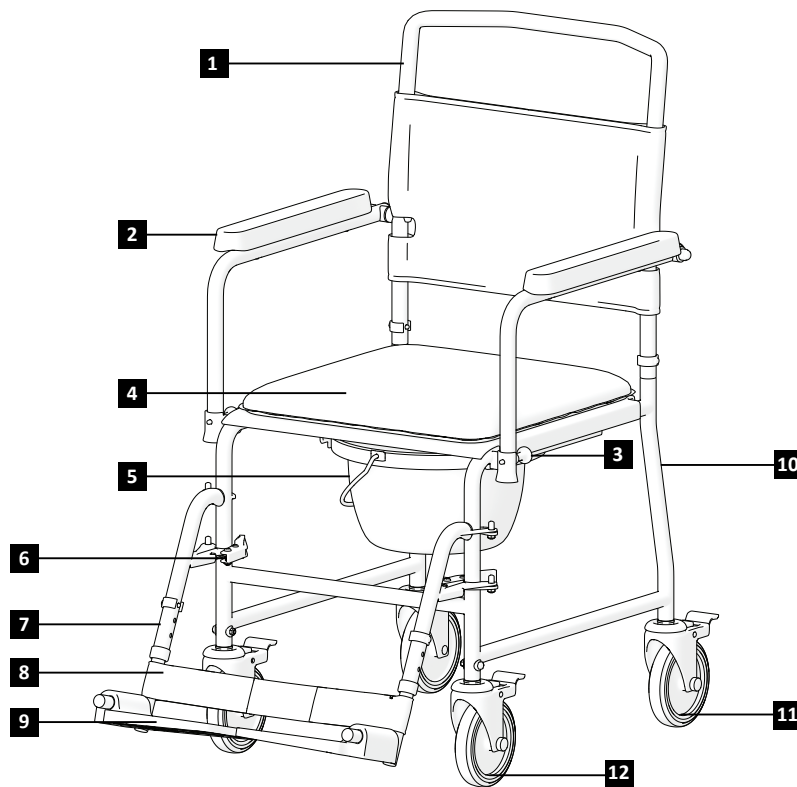

TUALETO KĖDĖS SU RATUKAIS SURINKIMAS

Norėdami surinkti tualetą kėdę su ratukais:

1. Įstatykite atlošą į pagrindinį rėmą ir pritvirtinkite iš abiejų pusių naudodami C formos spaustukus (1 pav.).
2. Norėdami pritvirtinti pakojus, uždėkite juos ant dviejų stovelių, esančių ant rėmo. Tuomet pasukite pakojus į vidų, kol jie užsifiksuos. Užfiksuokite pakojį, užlenkdami chromuotą svirtį į vidų - užfiksavus jį tvirtai laikysis. Nesumaišykite kairiųjų ir dešiniųjų pakojų!
Po sumontavimo, pakojų plokštelė turi būti nukreipta į vidų.
Norėdami atlenkti pakojį, atlenkite chromuotą svirtį ir tuo pačiu stumkite pakojį į išorę. Tuomet pakojus galima pakelti ir nuimti (2 pav.).

Stabdžiai

Priekiniai ir galiniai tualetą kėdės ratukai turi stabdžius. Norėdami įjungti stabdžius, nuspauskite svirtį žemyn. Norėdami pajudėti, pakelkite svirtį aukštyn (3 - 4 pav.).

**ĮSPĖJIMAS**

Įsitikinkite prieš sėdami, kad bent trys ratukai būtų užfiksuoti, užtikrinant saugų ir stabilų kėdės naudojimą (5 pav.).

Puodas su dangčiu

Po plastikine sėdyne dedamas puodas su dangčiu. Norėdami įdėti puodą, įstumkite jį po sėdyne iš kėdės galo. Įsitikinkite, kad puodas tvirtai laikosi ant dviejų po sėdyne esančių bėgelių (6 pav.).

Norėdami išimti puodą, ištraukite jį iš po sėdynės. Uždėkite dangtį ir puodą saugiai neškite naudodami chromuotą rankeną (7 pav.).

Pakojai

Pakojų ilgį galima reguliuoti pagal naudotojo poreikius. Norėdami sureguliuoti, išimkite C formos spaustuką ir stumkite vidinį vamzdį į vidų arba į išorę, priklausomai nuo to, ar norite pakojus sutrumpinti, ar pailginti. Pasirinkę reikiamą ilgį, vėl įstatykite ir pritvirtinkite C formos spaustuką (8 pav.).

PRIEŽIŪRA

Norėdami užtikrinti, kad tualetų kėdė su ratukais veiktų saugiai ir patikimai, reguliariai atlikite toliau nurodytus tikrinimo ir techninės priežiūros darbus arba paveskite juos kitam asmeniui. Toliau rasite rekomenduojamą techninės priežiūros grafiką.

	Prieš naudodami	Kartą per savaitę	4–6 kartus per metus	Kartą per metus
Patikrinkite, ar tualetų kėdė su ratukais pastatyta tinkamai ir stabiliai.	X			
Patikrinkite apžiūrėdami		X		
Patikrinkite stabdžius		X		
Tualetų kėdę su ratukais turi patikrinti įgaliotasis pardavėjas.				X

**ĮSPĖJIMAS**

Tualetų kėdės su ratukais remonto ar reguliavimo darbus turi atlikti įgaliotasis serviso darbuotojas, kai ja nesinaudojama.

**ATSARGIAI**

Naudokite tik originalias atsargines dalis. Pardavėjui pateikite modelio ir serijos numerį arba kreipkitės tiesiai į gamintoją. Gamintojas ir platintojas neatsako už žalą, padarytą gaminiui ar naudotojui, jei naudojamos neoriginalios atsarginės dalys ir (arba) remonto darbai buvo atlikti neautorizuotoje įstaigoje.

LAIKYMAS

Tualetų kėdę reikia laikyti sausoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.

TVARUS NAUDOJIMAS

Tualetų kėdė su ratukais tinka pakartotiniam naudojimui. Reikėtų atlikti toliau nurodytus veiksmus:

Valymas ir dezinfekavimas (žr. skyrių „VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS“);

Patikrinimas (žr. skyrių „PRIEŽIŪRA“);

Tualetų kėdė su ratukais turi būti pritaikyta naujam naudotojui pagal techninę dokumentaciją.

VALYMAS IR DEZINFEKAVIMAS

VALYMAS

- Rekomenduojama naudoti vienkartinės pirštines.
- Valymui rekomenduojama naudoti neutralų pH ploviklį ir šiltą vandenį – prieš dezinfekavimą.
- Pradėkite nuo viršaus: nuvalykite nugaros atramą ir porankius (nepamirškite ir porankių apačios).
- Nuimkite tualetą dangtį ir išvalykite jo viršutinę bei apatinę dalį.
- Jei konstrukcija leidžia, nuimkite sėdynę ir nuvalykite abi jos puses.
- Gaminį laikykite švarų ir be dulkių – valykite dulkių šluotele arba drėgna šluoste su švelniu plovikliu.

DEZINFEKAVIMAS

- Rekomenduojama naudoti vienkartinės pirštines.
- Dezinfekcijai rekomenduojama naudoti chloro pagrindu pagamintą dezinfekcinį tirpalą.
- Ištuštinkite puodo turinį ir praskalaukite jį vandeniu. Valymui naudokite neutralų pH ploviklį su šiltu vandeniu, o dezinfekavimui chloro pagrindu pagamintą tirpalą.
- Pradėkite nuo viršaus: dezinfekuokite nugaros atramą ir porankius (nepamirškite ir jų apatinės pusės).
- Nuimkite dangtį ir dezinfekuokite jo viršutinę bei apatinę dalį.
- Jei įmanoma, nuimkite sėdynę ir dezinfekuokite abi jos puses.

UTILIZAVIMAS

Tausokite gamtą ir tinkamai utilizuokite savo prietaisą. Utilizavimas priklauso nuo nacionalinių ir vietinių taisyklių. Norėdami prietaisą tinkamai perdirbti, kreipkitės į vietos bendruomenę, atliekų tvarkymo įmonę arba mūsų aptarnavimo skyrių.

INCIDENTAI

Apie bet kokius rimtus incidentus, susijusius su šiuo prietaisu, reikia pranešti UAB Kasko Group | Kid-Man® ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

KONTAKTAI:

Gamintojas: UAB „Kasko Group“ (registruotasis prekės ženklas Kid-Man®)

Adresas: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Lietuva

Telefono Nr.: +370 5 265 0000

El. paštas: info@kid-man.com

Interneto svetainė: www.kid-man.com



Automatinis kontaktų pildymas naudojant QR kodą

SPECIFIKACIJOS

Modelis	MOBIS
REF	02-8015C
Didžiausia saugi apkrova (kg)	130
Svoris (pilnai surinkta) (kg)	12.4
Sėdynės aukštis (cm)	49
Sėdynės plotis (cm)	45
Sėdynės gylis (cm)	43
Bendras aukštis (cm)	100
Bendras plotis (cm)	57.5
Bendras ilgis (cm)	93
Pakojų ilgis (cm)	34 - 38
Tarpas tarp pakojų (cm)	37
Pakojų ilgis (cm)	17
Pakojų plotis (cm)	15
Pakojų diržo matmenys (cm)	70 x 5
Porankio ilgis (cm)	37
Porankio plotis (cm)	5
Ratuko dydis (cm)	12.5 x 3

SIMBOLI

Šajā lietošanas instrukcijā brīdinājumi ir apzīmēti ar simboliem.

Brīdinājumu simboliem ir pievienots virsraksts, kas norāda uz bīstamības nopietnību vai sniedz pamatinformāciju.

 Sniedz pamatinformāciju, ieteikumus un informāciju efektīvai un drošai lietošanai.

 **BRĪDINĀJUMS /IEVĒROT PIESARDZĪBU** — lai norādītu, ka, lietojot ierīci, ir jāievēro piesardzība. Lai norādītu, ka pašreizējā situācijā ir nepieciešama operatora izpratne vai operatora rīcība, lai izvairītos no nevēlamām sekām.

 **UZMANĪBU!** Šī zīme tiek izmantota attiecībā uz ļoti svarīgām daļām, kas attiecas uz jūsu drošību. Skatīt lietošanas instrukciju.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

 **BRĪDINĀJUMS**
Negadījumu risks. Lai tualetes krēsls tiktu izmantots pareizi un droši, ieteicams ievērot drošības norādījumus. Šis krēsls ir izveidots, lai to varētu stabili uzstādīt un tas nodrošinātu stabilitāti sēdus stāvoklī. Ikviens kustība uz tualetes krēsla ietekmē smaguma centru, kas var izraisīt krēsla apgāšanos.

 **IEVĒROT PIESARDZĪBU**
Tualetes krēsls ir paredzēts izmantošanai vienai personai.

 **BRĪDINĀJUMS**
Tualetes krēsla remonts, tīrīšana vai regulēšana ir jāveic, kamēr preces lietotājs neizmanto tualetes krēslu.

 **BRĪDINĀJUMS**
Aizliegts pārsniegt tualetes krēsla maksimāli drošo slodzi.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

IEVADS

Šajā lietošanas instrukcijā ir ietverta svarīga informācija par preces lietošanu. Lai garantētu drošību produkta lietošanā, lūdzam rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju un ievērot drošības norādījumus.

Tualetes krēsls uz riteņiem ir praktisks, drošs un ērts risinājums cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai situācijās, kad piekļuve standarta tualetei ir ierobežota. Ikviens tualetes krēsls rūpīgi tiek pārbaudīts ražotnē, nodrošinot, ka lietotājam tiek nodots tikai uzticams un kvalitatīvs produkts. Lai krēsls kalpotu ilgāk, ieteicams to uzglabāt sausā vietā, aizsargāt no tiešiem saules stariem un regulāri tīrīt.

Šī lietošanas instrukcija ir pieejama vairākās valodās, lai atbilstu MDR 2017/745 prasībām. Pārliecinieties, lai lietotājam tiktu nodrošināta pareizā valodas versija atbilstoši lietotāja dalībvalstij.

i

Nemiet vērā, ka šajā dokumentā var būt sadaļas, kas nav piemērojamas konkrēti jūsu precei, jo dokuments attiecas uz visiem pieejamajiem modeļiem. Ja nav norādīts citādi, katra šī dokumenta sadaļa attiecas uz visiem preces modeļiem.

PRIEKŠVārds

Paldies par izrādīto uzticību zīmolam Kid-Man®. Katrs produkts ir pārbaudīts rūpnīcā un ir izsūtīts nevainojamā stāvoklī. Vēlam jums veiksmi un ceram, ka UAB Kasko Group | Kid-Man® produkts pozitīvi ietekmēs jūsu ikdienas dzīvi.

GARANTIJA

Mēs izsniedzam 24 mēnešu garantiju no pirkuma datuma. Jebkādas neatļautas izmaiņas, kas produktam veiktas bez ražotāja apstiprinājuma, padarīs ražotāja atbildību par spēkā neesošu. Tas ietver maksimālo lietotāja slodzes pārsniegšanu un nepareizu produkta izmantošanu. Garantija ir spēkā tikai ar pilnībā aizpildītu garantijas talonu. UAB „Kasko Group” pēc preces saņemšanas no pircēja 4 nedēļu laikā izlemj, vai problēma tiks risināta garantijas ietvaros. Ja uz problēmu neattiecas garantija un klients tam piekrīt, UAB „Kasko Group”, ja iespējams, novērs problēmu. Visas izmaksas, ieskaitot transportēšanas izmaksas, ir jāsedz klientam. Garantijas remonts nepagarina garantiju.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies sekojošu iemeslu dēļ:

- Lietošanas instrukcijas neievērošana;
- Nepareiza lietošana;
- Dabisks nolietojums;
- Nepareiza montāža vai uzstādīšana, ko veicis pircējs, vai tehniskas izmaiņas, kuras veikusi trešā puse;
- Nesaskaņotu trešās puses aksesuāru un piederumu izmantošana noteikto ražotāja aksesuāru un piederumu vietā;
- Neatļautas modifikācijas un/vai nepiemērotu rezerves daļu izmantošana.

STANDARTI UN NOTEIKUMI

Tualetes krēsls uz riteņiem atbilst šādām prasībām:

a) 2017. gada 5. aprīļa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm, ar kuru tika grozīta Direktīva 2001/83/EK, Regula (EK) Nr. 178/2002 un Regula (EK) Nr. 1223/2009, un ar kuru tika atceltas Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK;

KALPOŠANAS LAIKS

Paredzamais kalpošanas laiks ir 5 (pieci) gadi, pieņemot, ka produkts tiek lietots katru dienu, saskaņā ar drošības instrukciju, apkopes norādēm un tam paredzēto lietojumu, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā.

Pēc tam tualetes krēsls uz riteņiem ir jānodod pārstrādei. Tualetes krēslu nedrīkst izmest kopā ar parastajiem atkritumiem (skatīt sadaļu "UTILIZĀCIJA").

INFORMĀCIJA PAR RAŽOTĀJU

Ražotājs: UAB "Kasko Group" (reģistrēta preču zīme Kid-Man®)

Adrese: A. Vivulskio 12D, Viļņa, LT-03221, Lietuva

Tālrunis: +370 5 265 0000

E-pasts: info@kid-man.com

Tīmekļa vietne: www.kid-man.com

INFORMĀCIJA PAR PRECI

Produkts: TUALETES KRĒSLS UZ RITEŅIEM

Modelis: MOBIS

REF: 02-8015C

PAREDZĒTAIS LIETOŠANAS MĒRĶIS UN INDIKĀCIJAS

Paredzēts lietošanai personām ar kustību traucējumiem vai citos gadījumos, kad nav iespējams izmantot parasto tualeti.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas nekādas kontrindikācijas, ja tualetes krēsls uz riteņiem tiek izmantots atbilstoši paredzētajam mērķim.

PAREDZĒTIE LIETOTĀJI

Tualetes krēsls uz riteņiem paredzēts personām ar invaliditāti, ja nav iespējams izmantot parasto tualeti, un tas ir paredzēts maksimālajai lietotāja svara slodzei līdz 130 kg.



BRĪDINĀJUMS


Negadījumu risks.

Aizliegts pārsniegt tualetes krēsla maksimālo drošo slodzi.

PRECES MARKĒJUMS

Identifikācijas marķējums ir piestiprināts pie preces (skat. attēlu).

1. Produkts
2. Modelis
3. Maksimālā slodze
4. Ražotājs / kontaktinformācija
5. Ražošanas datums
6. UDI (Medicīniskās ierīces unikālais identifikators)/ SN kods
7. CE marķējums
8. Iepazīstieties ar lietošanas instrukciju

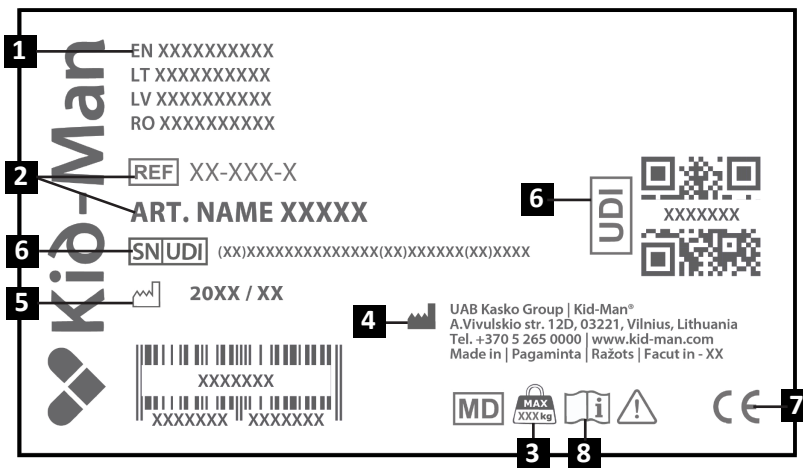

IĒPAKOJUMA SATURS

MOBIS tualetes krēsls tiek piegādāts kartona iepakojumā un ir gatavs lietošanai. Ja iespējams, pēc izpakojšanas saglabāji iepakojumu. Iespējams, tas vēlāk būs nepieciešams ierīces uzglabāšanai vai atgriešanai.


Kad sūtījums ir saņemts, pārbaudiet, vai sūtījums un prece transportēšanas laikā nav bojāti.

i Ja redzat bojājumu pazīmes, lūdzam nekavējoties par to ziņot transporta uzņēmumam.

i Pārbaudiet iepakojuma saturu un, ja trūkst kādas no tālāk norādītajām detaļām, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Iepakojuma saturs:

1. 1 × Roku balsts, atzveltne un stumšanas rokturis
2. 1 × Rāmis ar priekšējiem un aizmugurējiem ritenīšiem
3. 1 × Sēdekļa pārsegs
4. 1 × Sēdekļis ar atvērumu
5. 1 × Spainis ar vāku
6. 2 × C-veida stiprinājumi
7. 1 × Kāju balsta sikсна
8. 2 × Kāju balsti
9. Lietošanas instrukcija

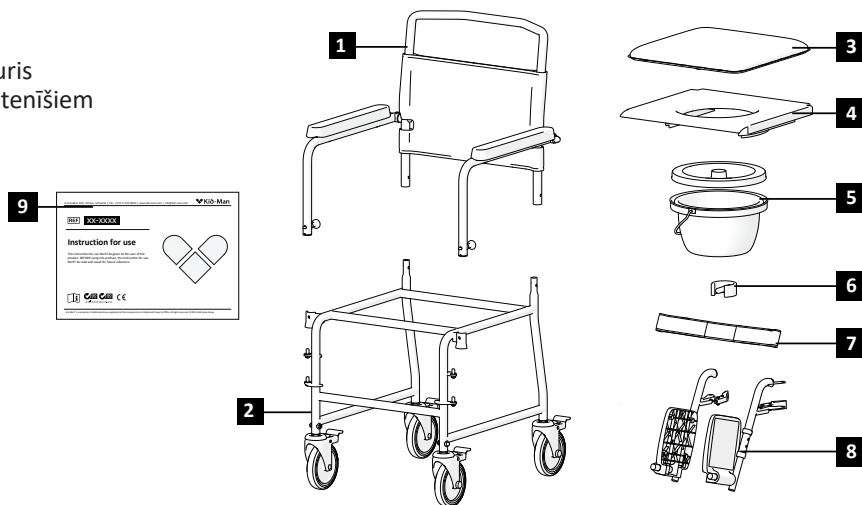


SASTĀVDAĻAS UN FUNKCIJAS

Pārskats:

1. Atzveltne
2. Roku balsts
3. Roku balsta fiksators
4. Sēdekļis
5. Spainis ar vāku
6. Kāju balsta svira
7. Kāju balsts
8. Kāju balsta siksna
9. Pēdu balsts
10. Rāmis
11. Aizmugurējais ritenītis ar bremzi
12. Priekšējais ritenītis ar bremzi

i Jūsu tualetes krēsla dizains var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā aprakstītā izstrādājuma sakarā ar nepārtrauktu produkta attīstīšanu.

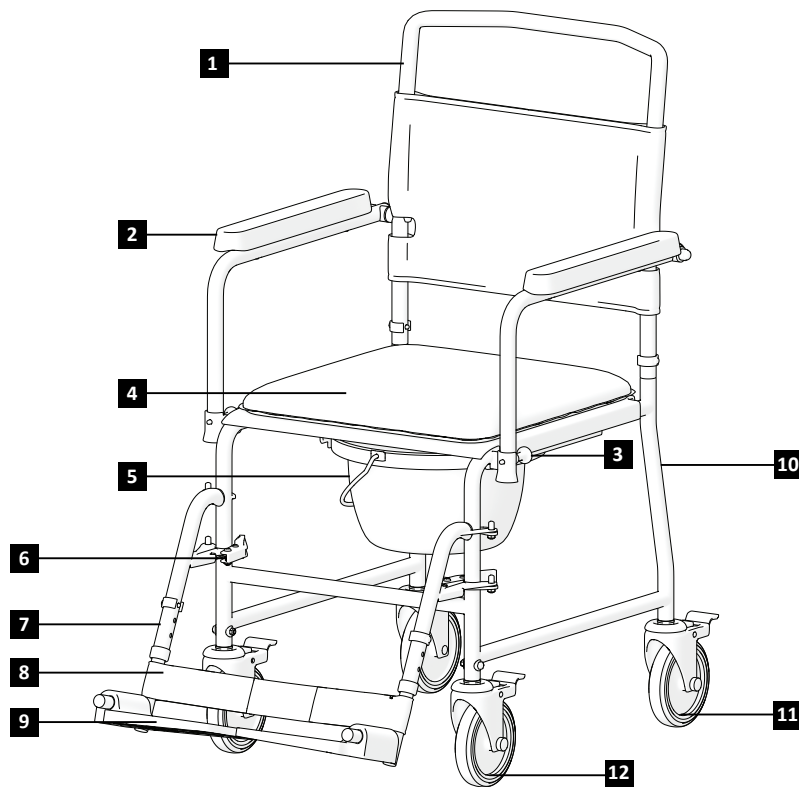

TUALETES KRĒSLA MONTĀŽA

Tualetes krēsla **montāža**:

1. Ievietojiet atzveltni galvenajā rāmī un no abām pusēm nostipriniet ar C-veida stiprinājumu (1. attēls).
2. Lai pievienotu kāju balstu, novietojiet to uz rāmī esošajiem diviem stiprinājuma stieņiem. Tad pagrieziet kāju balstu uz iekšpusi, līdz tas nofiksējas vietā. Nostipriniet kāju balstu, spiežot hromēto sviru uz iekšpusi. Kad kāju balsts ir nofiksēts, tam jāstāv stingri. Nesajauciet labo un kreiso kāju balstu!
Pēc uzstādīšanas kāju balsta plāksnei jābūt pavērstai uz iekšpusi.
Lai kāju balstu izbīdītu uz āru, vienlaikus spiediet hromēto sviru un bīdīet kāju balstu prom no rāmja. Tad kāju balstu var pacelt uz augšu un noņemt (2. attēls).

Bremzes

Tualetes krēsla priekšējie un aizmugurējie ritenīši ir aprīkoti ar bremzēm. Lai nobremzētu, vienkārši nospiediet bremžu sviru uz leju. Kad nepieciešams pārvietot krēslu, pabīdīet sviru augšup (3.–4. attēls).



BRĪDINĀJUMS

Sēžot krēslā, pārliecinieties, lai vismaz trīs ritenīši būtu nobloķēti, lai nodrošinātu drošu un stabilu krēsla lietošanu (5. attēls).

Spainis ar vāku

Spainis un vāks atrodas zem plastmasas sēdekļa. Lai novietotu spaini, ievietojiet to zem sēdekļa no tualetes krēsla aizmugures. Pārliecinieties, lai spainis būtu droši nostiprināts uz abām sliedēm zem sēdekļa (6. attēls).

Lai noņemtu spaini, izvelciet to no zem sēdekļa. Uzlieciet vāku un droši pārvietojiet spaini, turot to aiz hromētā roktura (7. attēls).

Kāju balsti

Kāju balsta garumu var pielāgot lietotāja vajadzībām. Lai to noregulētu, noņemiet C-veida stiprinājumu un pabīdīet iekšējo cauruli uz iekšu vai āru, atkarībā no tā, vai vēlaties saīsināt vai pagarināt kāju balstu. Pēc nepieciešamā garuma izvēles atkal ievietojiet un nostipriniet C-veida stiprinājumu (8. attēls).

APKOPE

Lai nodrošinātu drošu un uzticamu produkta darbību, regulāri veiciet šādas pārbaudes un apkopi vai uzticiet to veikt citai personai. Zemāk atradīsiet ieteicamo apkopes grafiku.

	Pirms lietošanas	Vienreiz nedēļā	4-6 reizes gadā	Vienreiz gadā
Pārbaudiet, vai tualetes krēsls uz riteņiem ir pareizi novietots un atrodas stabilā pozīcijā	X			
Vizuāla pārbaude		X		
Pārbaudiet bremzes		X		
Iedodiet tualetes krēslu pārbaudīt pilnvarotajam izplatītājam				X



BRĪDINĀJUMS

Tualetes krēsla remonts, tīrīšana vai regulēšana ir jāveic pilnvarotai servisa personai, kamēr preces lietotājs neizmanto tualetes krēslu.



IEVĒROT PIESARDZĪBU

Rezerves daļu nomainai drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas. Paziņojiet modeļa un sērijas numuru izplatītājam vai sazinieties tieši ar ražotāju. Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgi par jebkādiem bojājumiem, kas radušies produktam, vai kaitējumam, kas ir nodarīts lietotājam, ja tiek izmantotas neoriģinālās rezerves daļas un (vai) remonts ir veikts neautorizētā servisā.

UZGLABĀŠANA

Produkts jāuzglabā sausā vidē, prom no tiešiem saules stariem.

OTRREIZĒJA LIETOŠANA

Tualetes krēsls ir piemērots otrreizējai lietošanai citai personai. Šādā gadījumā ir jāveic šādas darbības:
Tīrīšana un dezinfekcija (skat. nodaļu “TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA”);
Pārbaude (skatīt nodaļu “APKOPE”).
Tualetes krēsls ir jāpielāgo jaunajam lietotājam saskaņā ar servisa dokumentāciju.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

TĪRĪŠANA

- Ieteicams izmantot vienreizlietojamus cimdus.
- Tīrīšanai pirms dezinfekcijas ieteicams izmantot pH neitrālu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni.
- Sākot no augšas, notīriet atzveltni un roku balstus (neaizmirstiet notīrīt zem roku balstiem).
- Noņemiet poda vāku un notīriet to – vispirms augšējo, pēc tam apakšējo pusi.
- Ja konstrukcija to ļauj, noņemiet sēdekli un notīriet tā augšējo un apakšējo pusi.
- Krēsls jātur tīrs un bez putekļiem – to var veikt ar putekļu lupatu vai mitru drānu un vieglu mazgāšanas līdzekli.

DEZINFEKCIJA

- Ieteicams izmantot vienreizlietojamus cimdus.
- Dezinfekcijai ieteicams izmantot uz hlora bāzes izstrādātu dezinfekcijas līdzekli.
- Izlejiet spaini un izskalojiet to ar ūdeni. Tīrīšanai izmantojiet pH neitrālu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni, bet dezinfekcijai – hlora saturošu šķīdumu.
- Sākot no augšas, dezinficējiet atzveltni un roku balstus. Neaizmirstiet iekļaut arī apakšpusi.
- Noņemiet poda vāku un dezinficējiet to – vispirms augšējo, pēc tam apakšējo pusi.
- Ja iespējams, noņemiet sēdekli un dezinficējiet gan augšējo, gan apakšējo pusi.

UTILIZĀCIJA

Saudzējiet dabu un pareizi utilizējiet ierīci. Utilizācija ir atkarīga no valsts un vietējiem noteikumiem.

Lai pareizi pārstrādātu ierīci, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu vai mūsu apkalpošanas nodaļu.

NEGADĪJUMI

Par jebkuru nopietnu negadījumu, kas noticis saistībā ar šo ierīci, ir jāziņo UAB Kasko Group | Kid-Man® un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir deklarēts.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Ražotājs: UAB “Kasko Group” (reģistrēta preču zīme Kid-Man®)

Adrese: A.Vivulskio 12D, Viļņa, LT-03221, Lietuva

Tālrunis: +370 5 265 0000

E-pasts: info@kid-man.com

Timekļa vietne: www.kid-man.com



Automātiski aizpildīt kontaktinformāciju, izmantojot QR kodu

SPECIFIKĀCIJA

Modelis	MOBIS
REF	02-8015C
Maksimāli drošā slodze (kg)	130
Svars (pilnībā uzstādītā stāvoklī) (kg)	12.4
Sēdekļa augstums (cm)	49
Sēdekļa platums (cm)	45
Sēdekļa dziļums (cm)	43
Kopējais augstums (cm)	100
Kopējais platums (cm)	57.5
Kopējais garums (cm)	93
Kāju balsta garums (cm)	34 - 38
Atstatums starp kāju balstiem (cm)	37
Kāju balsta plāksnes garums (cm)	17
Kāju balsta plāksnes platums (cm)	15
Kāju balsta siksnas izmēri (cm)	70 x 5
Roku balsta garums (cm)	37
Roku balsta platums (cm)	5
Riteņa izmērs (cm)	12.5 x 3

EE**SÜMBOLID**

**Selles kasutusjuhendis on hoiatused tähistatud sümbolitega.
Hoiatussümbolitele on lisatud pealkiri, mis näitab ohu tõsidust või põhiteavet.**

i Annab põhiteavet, soovitusi ja informatsiooni tõhusaks ja probleemivabaks kasutamiseks.



HOIATUS / ETTEVAATUST – näitamaks, et seadme kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. Näitamaks, et praegune olukord vajab kasutajapoolset teadlikkust või toimingut vältimaks soovimatuid tagajärgi.



TÄHELEPANU! Seda märki kasutatakse teie turvalisust puudutavate väga oluliste osade jaoks. Palun vaadake kasutusjuhendit.

OHUTUSTEAVE**HOIATUS**

Õnnetuste oht. Õigeks ja ohutuks kasutamiseks soovitame potitooli kasutamisel järgida ohutusjuhiseid. See tool on mõeldud stabiilseks paigaldamiseks ja stabiilsuse tagamiseks istudes. Iga liigutus potitoolil mõjutab raskuspunkti ja võib põhjustada tooli ümbermineku.

**ETTEVAATUST**

Potitool sobib ainult ühele inimesele.

**HOIATUS**

Kõik hooldus-, puhastus- ja reguleerimistööd tuleb teha siis, kui ratastega potitooli ei kasutata.

**HOIATUS**

Keelatud on ületada potitooli maksimaalset ohutut koormust.

ÜLDINE

SISSEJUHATUS

See kasutusjuhend sisaldab olulist teavet toote käsitsemise kohta. Ohutuse tagamiseks toote kasutamisel lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja järgige ohutusjuhiseid.

Ratastega potitool on praktiline, ohutu ja mugav lahendus inimestele, kellel on liikumisraskusi või olukordades, kus ligipääs tavatualetile on piiratud. Iga potitool läbib tehases põhjaliku kvaliteedikontrolli tagamaks, et kasutajani jõuab ainult töökindel ja kvaliteetne toode. Pikaajalise tagamiseks on soovitatav hoida tooli kuivas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest, ning puhastada seda regulaarselt.

See kasutusjuhend on MDR 2017/745 vastavuseks saadaval mitmes keeles. Veenduge, et kasutajale esitatakse vastavas liikmesriigis õiges keeles versioon.



Pange tähele, et selles dokumendis võib olla jaotisi, mis ei ole teie toote puhul asjakohased, kuna see dokument kehtib kõigi saadolevate mudelite kohta. Kui pole märgitud teisiti, viitavad selle dokumendi kõik jaotised toote kõikidele mudelitele.

EESSÕNA

Täname teid Kid-Man®-ile antud usalduse eest. Iga toode on tehases kontrollitud ja teele saadetud veatus seisukorras. Soovime teile palju edu ja loodame, et UAB „Kasko Group“ | Kid-Man®-i toode mõjutab teie igapäevaelu positiivselt.

GARANTII

Anname garantii 24 kuuks alates ostukuupäevast. Kõik volitamata muudatused, mis on tehtud ilma tootja nõusolekuta, muudavad vastutuse kehtetuks. Selle alla käib maksimaalsete kasutajakooormuste ületamine ja toote ebaõige kasutamine. Garantii kehtib ainult täielikult täidetud garantiikaardiga. UAB „Kasko Group“ otsustab pärast 4 nädala jooksul ostjalt kauba nõude saamist, kas probleem läheb garantii alla. Kui probleem ei kuulu garantii alla ja klient on sellega nõus, lahendab UAB „Kasko Group“ võimalusel probleemi. Kõik kulud, sealhulgas transpordikulud, peab katma klient. Garantiiremont ei pikenda garantiid.

VASTUTUSE PIIRANG

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad järgmisest:

- kasutusjuhendi mittejärgimine;
- ebaõigest kasutamine;
- loomulik kulumine;
- ostjapoolne ebaõige kokkupanek või seadistamine või kolmanda poole tehnilised muudatused;
- heakskiitmata kolmanda poole tarvikute kasutamine tootja toodetud heakskiidetud tarvikute asemel;
- volitamata muudatused ja/või sobimatute varuosade kasutamine.

STANDARDID JA MÄÄRUSED

Ratastega potitool vastab järgmistele nõuetele:

a) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/745 5. aprillist 2017 meditsiiniseadmete kohta, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ.

KASUTUSIGA

Eeldatav kasutusiga on 5 (viis) aastat, eeldades, et toodet kasutatakse igapäevaselt ning vastavalt selles kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiste, hooldusjuhendile ja sihtotstarbele.

Seejärel tuleb ratastega potitool anda ümbertöötlusse. Ärge visake oma tooli tavaliste jäätmete hulka (vt peatükki „UTILISEERIMINE“).

TEAVE TOOTJA KOHTA

Tootja: UAB „Kasko Group“ (registreeritud kaubamärk Kid-Man®)

Address: A. Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Leedu

Telefon: +370 5 265 0000

E-post: info@kid-man.com

Koduleht: www.kid-man.com

TEAVE TOOTE KOHTA

Toode: RATASTEGA POTITOOL

Mudel: MOBIS

VIIDE: 02-8015C

KASUTUSEESMÄRK JA -NÄIDUSTUSED

Potitool on mõeldud kasutamiseks liikumispuudega inimestele või muudel juhtudel, kui tavatualeti kasutamise võimalus on piiratud.

VASTUNÄIDUSTUSED

Ratastega potitooli sihipärasel kasutamisel ei ole teada vastunäidustusi.

ETTENÄHTUD KASUTAJAD

Ratastega potitool on mõeldud puuetega inimestele juhtudel, kui tavatualeti kasutamine on piiratud, ning selle maksimaalne kandevoime on 130 kg.



HOIATUS


Õnnetuste oht.

Keelatud on ületada potitooli maksimaalset ohutut koormust.

TOOTE ETIKETT

Tunnussilt on kinnitatud tootele (vt Joonist).

1. Toode
2. Mudel
3. Maksimaalne koormus
4. Tootja/kontaktandmed
5. Tootmiskuupäev
6. UDI-/ SN-kood
7. CE-märgis
8. Vt kasutusjuhendit

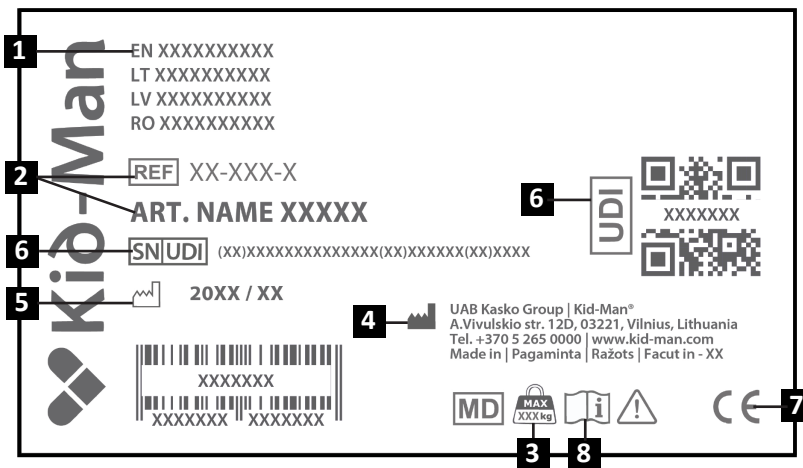

PAKENDI SISU

Ratastega potitool MOBIS tarnitakse papp-pakendis ja on kasutusvalmis. Pärast lahtipakkimist hoidke võimaluse korral pakend alles. Teil võib seda hiljem vaja minna hoiulepanekuks või vahendi tagastamiseks.


Pärast paki kättesaamist kontrollige, et see pole transpordi käigus kahjustada saanud.

i Kui näete kahjustuse märke, andke sellest kohe transpordifirmale teada.

i Kontrollige pakendi sisu ja kui mõni alltoodud osadest puudub, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga.

Pakendi sisu:

1. 1 x Käetugi, seljatugi ja lükkesang
2. 1 x Raam eesmistest ja tagumistest ratastega
3. 1 x Istmekate
4. 1 x Väljalõikega iste
5. 1 x Kaanega ämber
6. 2 x C-klamber
7. 1 x Jalatoe rihm
8. 2 x Jalatugi
9. Kasutusjuhend

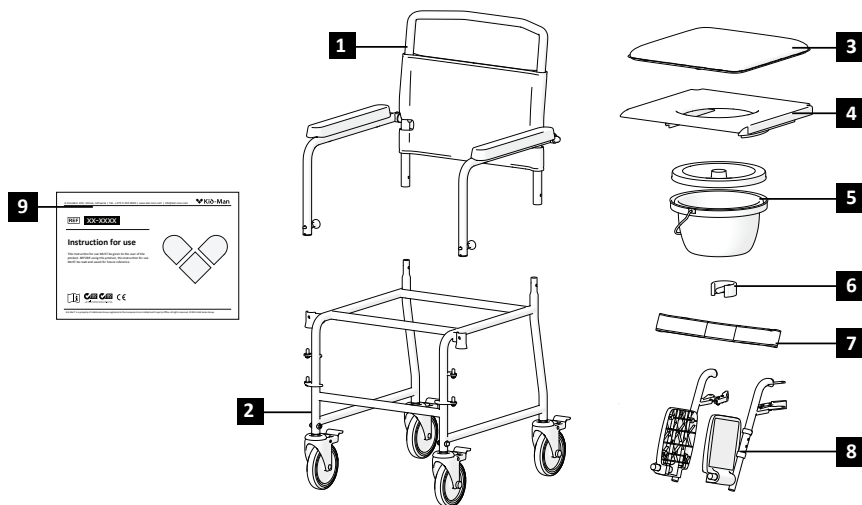


KOMPONENDID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade:

1. Seljatugi
2. Käetugi
3. Käetoel lukustusmehhanism
4. Iste
5. Kaanega ämber
6. Jalatoel pööramise hoob
7. Jalatugi
8. Jalatoel rihm
9. Jalaplaat
10. Raam
11. Piduriga tagumine pöördratas
12. Piduriga esiratas

i Teie potitooli disain võib toote pideva arendamise tõttu veidi erineda selles juhendis kirjeldatud toolist.

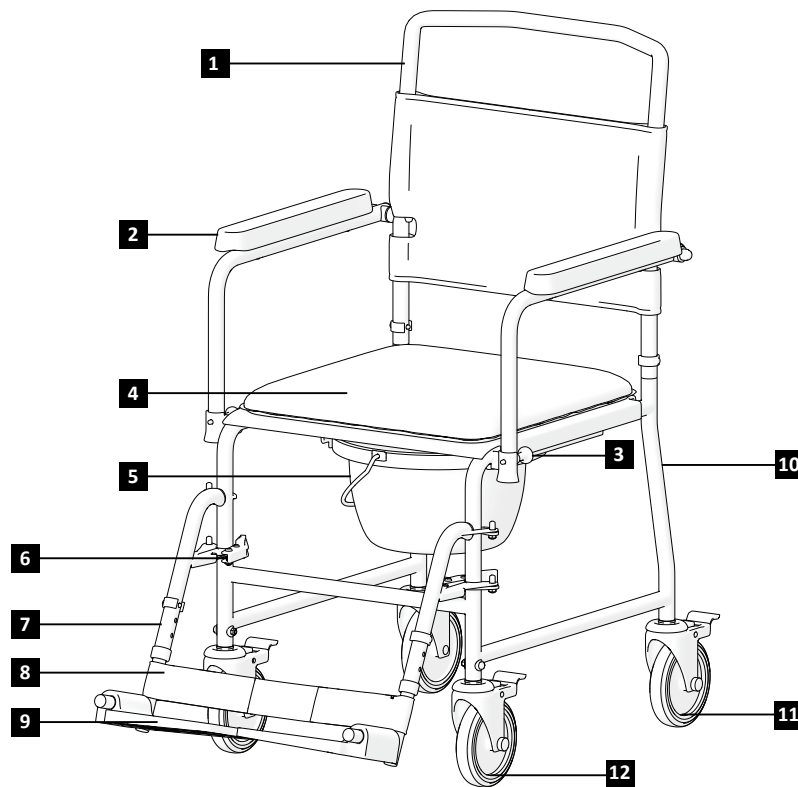

RATASTEGA POTITOOLI KOKKUPANEK**Potitooli kokkupanekuks:**

1. Sisestage seljatugi pöhoraami ja kinnitage see mõlemalt poolt C-klambriga (Joonis 1).
2. Jalatoe lisamiseks asetage jalatugi kahele raamil asuvale postile. Seejärel pöörake jalatuge sissepoole, kuni see lukustub. Lukustage jalatugi, vajutades kroomitud hooba sissepoole. Kui jalatugi on lukustatud asendisse, püsib see kindlalt paigal. Ärge ajage vasakut ja paremat jalatuge sassi!
Pärast paigaldamist peab jalaplaat olema sissepoole suunatud.
Jalatoe küljele pööramiseks vajutage kroomitud hooba, lükates jalatuge samal ajal eemale. Seejärel saab jalatoe üles tõsta ja eemaldada (Joonis 2).

Pidurid

Potitooli esi- ja tagaratastele on paigaldatud pidurid. Piduri rakendamiseks vajutage pidurihoob alla. Liikumise alustamiseks tõstke hoob üles (Joonised 3–4).

**HOIATUS**

Toolil istudes veenduge, et vähemalt kolm ratast on pidurdatud, et tagada ohutu ja stabiilne kasutamine (Joonis 5).

Kaanega ämber

Plastist istme all on koht ämbri ja kaane jaoks. Ämbri paigaldamiseks lükake see potitooli tagant istme alla. Veenduge, et ämber oleks kindlalt paigas kahel siinil, mis on kinnitatud istme alla (Joonis 6).

Ämbri eemaldamiseks lükake see istme alt välja. Pange kaas peale ja kandke ämbrit kindlalt, kasutades kroomitud sangaga käepidet (Joonis 7).

Jalatoed

Jalatoe pikkust saab reguleerida vastavalt kasutaja vajadustele. Reguleerimiseks eemaldage C-klamber ja liigutage sisetoru sissepoole või väljapoole, olenevalt sellest, kas soovite jalatuge lühendada või pikendada. Pärast vajaliku pikkuse valimist sisestage C-klamber tagasi ja kinnitage see (Joonis 8).

HOOLDUS

Ohutu ja usaldusväärse töö tagamiseks tehke regulaarselt läbi järgmised kontrollid ja hooldused või laske need teha mõnel teisel isikul. Altpoolt leiate soovitatud hooldusgraafiku.

	Enne kasutust	Kord nädalas	4–6 korda aastas	Kord aastas
Kontrollige, kas ratastega potitool on õigesti paigutatud ja stabiilne.	X			
Visuaalne kontroll		X		
Kontrollige pidureid		X		
Laske ratastega potitooli kontrollida volitatud edasimüüjal.				X

 **HOIATUS**
Ratastega potitooli remonti või reguleerimist peab tegema volitatud teeninduspersonal ajal, mil toodet ei kasutata.

 **ETTEVAATUST**
Asenduseks võib kasutada ainult originaalvaruosi. Esitage mudeli- ja seerianumber edasimüüjale või võtke otse ühendust tootjaga. Tootja ja edasimüüja ei vastuta tootele või kasutajale tekitatud kahjude eest, kui on kasutatud mitteoriginaalseid varuosi ja (või) remont on tehtud volitamata asutuses.

HOIUNDAMINE

Toodet tuleb hoida kuivas keskkonnas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

KORDUSKASUTAMINE

Ratastega potitool sobib korduskasutamiseks. Võtta tuleb järgmised toimingud:
Puhastamine ja desinfitseerimine (vt peatükki „PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE“);
Ülevaatus (vt peatükki „HOOLDUS“);
Ratastega potitool tuleb kohandada uue kasutaja jaoks vastavalt hooldusdokumentidele.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

PUHASTAMINE

- Soovitav on kasutada ühekordseid kindaid.
- Puhastamiseks enne desinfitseerimist soovitatakse kasutada pH-neutraalset pesuainet ja sooja vett.
- Alustades ülalt, puhastage seljatugi ja käetoed (ärge unustage puhastada ka käetugede alt).
- Eemaldage poti kaas ja puhastage see kõigepealt pealt, seejärel altpoolt.
- Kui disain võimaldab, eemaldage iste ja puhastage kõigepealt ülemine, seejärel alumine külg.
- Seadet tuleks hoida puhtana ja tolmuwabana – selleks sobib tolmulapp või niiske lapp ja õrn puhastusvahend.

DESINFITSEERIMINE

- Soovitav on kasutada ühekordseid kindaid.
- Desinfitseerimiseks on soovitav kasutada klooripõhist desinfitseerimislahust.
- Tühjendage ämber ja loputage veega.
- Kasutage puhastamiseks pH-neutraalset pesuainet ja sooja vett ning desinfitseerimiseks klooripõhist lahust.
- Alustades ülalt, desinfitseerige seljatugi ja käetoed (ärge unustage ka käetugede aluseid).
- Eemaldage poti kaas ja desinfitseerige see kõigepealt pealt, seejärel altpoolt.
- Kui disain võimaldab, eemaldage iste ja desinfitseerige kõigepealt ülemine, seejärel alumine külg.
- Desinfitseerige ka raam ja rattad.

UTILISEERIMINE

Hoidke loodust ja utiliseerige seade korrektselt. Utiliseerimise kord sõltub riiklikest ja kohalikest eeskirjadest. Seadme nõuetekohaseks ringlussevõtuks pöörduge kohaliku omavalitsuse, jäätmeäritluste või meie klienditeeninduse poole.

JUHTUMID

Igast seadmega seoses aset leidnud tõsisest juhtumist tuleb teatada UAB Kasko Group | Kid-Man®-le ja selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient asub.

KONTAKTID:

Tootja: UAB „Kasko Group“ (registreeritud kaubamärk Kid-Man®)

Address: A.Vivulskio 12D, Vilnius, LT-03221, Leedu

Telefon: +370 5 265 0000

E-post: info@kid-man.com

Koduleht: www.kid-man.com



Kontaktide automaatne täitmine ruutkoodi abil

SPETSIFIKATSIOONID

Mudel	MOBIS
VIIDE	02-8015C
Maksimaalne ohutu koormus (kg)	130
Kaal (täielikult kokkupanduna) (kg)	12.4
Istme kõrgus (cm)	49
Istme laius (cm)	45
Istme sügavus (cm)	43
Üldkõrgus (cm)	100
Üldlaius (cm)	57.5
Üldpikkus (cm)	93
Jalatoe pikkus (cm)	34 - 38
Jalatoe vahe (cm)	37
Jalaplaadi pikkus (cm)	17
Jalaplaadi laius (cm)	15
Jalatoe rihma mõõdmed (cm)	70 x 5
Käetoe pikkus (cm)	37
Käetoe laius (cm)	5
Ratta suurus (cm)	12.5 x 3

GARANTINIS TALONAS / GARANTIJAS TALONS / GARANTIICAART

Gaminio pavadinimas Preces nosaukums Toote nimi	Modelis, REF Modelis, REF Mudel, VIIDE	Pirkimo data (įrašyti) Pirkuma datums (ierakstīt) Ostukuupāev (sisesta)	Garantinis laikotarpis Garantijas laiks Garantiaeg
LT Tualetu kėdė su ratukais LV Tualetes krēsls uz riteņiem EE Ratastega potitool	MOBIS, 02-8015C		24 mēnesiai mēneši kuud

Published by UAB Kasko Group | Kid-Man®

A. Vivulskio g. 12D, 03221 Vilnius, Lithuania
Tel. +370 5 265 0000 | www.kid-man.com | info@kid-man.com

Paskutinio atnaujinimo data 2025-08-29

Pēdējās atjaunināšanas datums 2025-08-29

Viimase versiooni kuupāev 29.08.2025



Unikalūs priemonės identifikatorius (UDI) / serijos numeris (SN)
SN | UDI (Ierīces unikālais identifikators) vieta
SN | UDI (Seadme kordumatu identititseerimistunnus) koht

Jūsų pardavėjas
Jūsu izplatītājs
Teie edasimüüja